



TROUSSE DE SECOURS

LAVE ŒIL INDIVIDUELLE

Réf. TRO 2018 TP

- Œillère operculée
- Dosette de sérum physiologique stérile
- Compresse oculaires stériles
- Feuillet "Lave-œil"



ŒILLÈRE OPERCULÉE

Cupule adaptée à une dosette de 5 ml de sérum physiologique, l'opercule en aluminium, scellé, permet de protéger l'œillère de la poussière avant usage.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Verser le contenu d'une dosette de sérum physiologique de 5 ml
3. Rincer l'œil



DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...


Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter

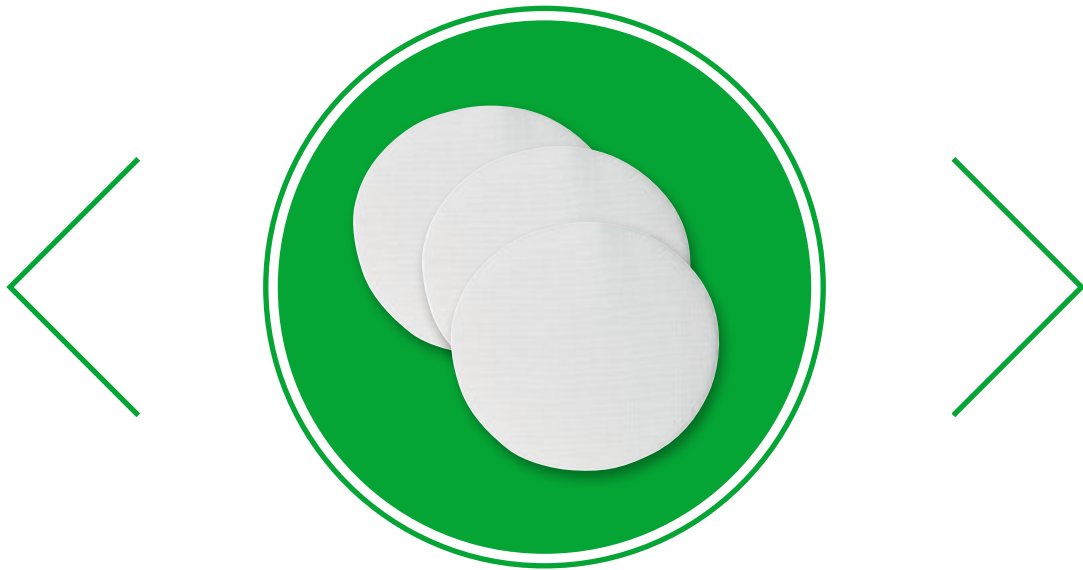

COMPRESSES OCULAIRES STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Diamètre de 6 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, et formées d'une nappe de coton non pelucheux maintenue par une nappe de gaze hydrophile, elles sont destinées à nettoyer ou à protéger les yeux. Elles sont à utiliser en complément d'une dosette de sérum.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :
 - Pour une protection : poser la compresse sur l'œil à protéger. Fixer la à l'aide d'un sparadrap
 - Pour un nettoyage : verser le contenu d'une dosette sur la compresse puis tamponner



FEUILLET “LAVE-ŒIL”

Cette notice explicative schématisée, vous permettra d'utiliser chaque produit contenu dans le coffret de manière optimale.

Elle contient également tous les numéros d'urgence.