



# TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE ÉCOLE

Réf. TRO 2760 ECO

- Écharpe triangulaire
- Pansements adhésifs
- Pansement compressif
- Compresses de gaze
- Bandes extensibles
- Sparadrap
- Paire de ciseaux
- Pince à échardes
- Paire de gants jetables
- Épingles de sûreté
- Thermomètre frontal
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Compresse imprégnée d'alcool à 70°
- Compresse imprégnée de solution à base de calendula
- Compresse imprégnée d'une solution apaisante moustique
- Compresse imprégnée de solution hydro-alcoolique
- Dosette de sérum physiologique stérile
- Lot de 2 mèches hémostatiques stériles
- Livret 1<sup>ers</sup> soins



## ÉCHARPE TRIANGULAIRE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, elle permet de soutenir un bras blessé, ou d'emballer toute partie du corps.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

Sortir l'écharpe de son emballage et la déplier

1. Glisser l'écharpe entre l'avant bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule
2. Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule
3. Rassembler par un nœud plat autour du cou ou fixer la avec une épingle de sûreté



## PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,  
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



## PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



## COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.  
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



## **BANDES EXTENSIBLES**

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


**Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm**

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

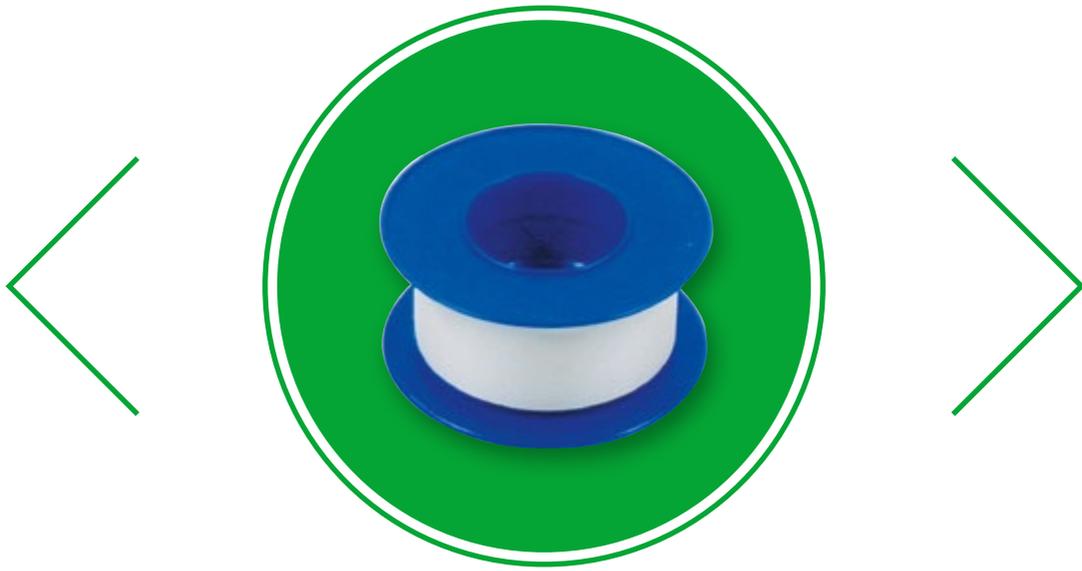

## SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

### MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire
2. Couper la aux ciseaux, ou à la main
3. Apposer à l'endroit désiré



## PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



## PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : écharde, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.



## PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



## ÉPINGLES DE SÛRETÉ

Lot de 12 épingles permettant de fixer une bande, une écharpe triangulaire...



## THERMOMÈTRE FRONTAL

Ce thermomètre frontal est fabriqué à partir de cristaux liquides. Il est gradué en degré Celsius et en Fahrenheit.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage, et attraper le thermomètre
2. Appliquer sur la partie haute du front. Le front doit être sec
3. La température s'inscrit dès l'application



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'ALCOOL À 70°


(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'alcool isopropylique à 70°. Cette solution est destinée au nettoyage et à la désinfection de la petite instrumentation ou de la peau saine (paire de ciseau, pince à échardes...). Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à nettoyer

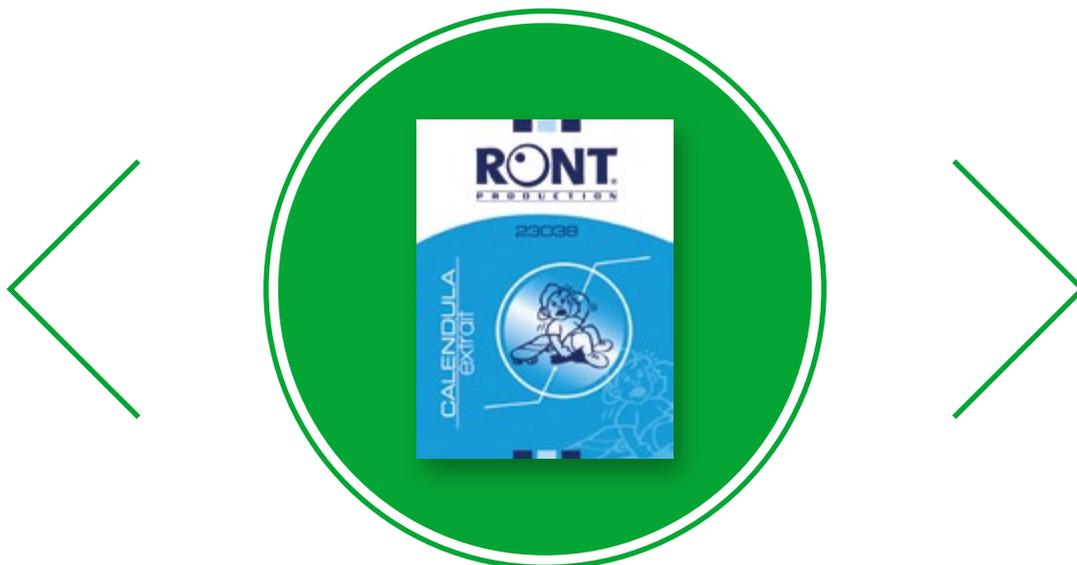

## COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION À BASE DE CALENDULA

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante anti-coups. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION APAISANTE MOUSTIQUE

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante après pique d'insectes.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydro-alcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains



## DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



## LOT DE 2 MÈCHES HÉMOSTATIQUES STÉRILES COALGAN®

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Mèches hémostatiques et cicatrisantes composées de fibres d'alginate de calcium d'origine végétale  
Produit stérile, à usage unique, à jeter après usage.  
Toujours utiliser dans son intégralité.

**Information complète sur la notice incluse**

### MODE D'EMPLOI :

#### Saignements de nez :

1. Ouvrir l'emballage
2. Torsader la mèche et l'humidifier avec du sérum physiologique pour faciliter l'introduction dans la narine
3. Insérer dans la narine et pincer les 2 narines pendant 10 minutes
4. Laisser Coalgan® en place au moins 30 min et au max 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche

#### Plaies cutanées :

1. Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique
2. Ouvrir l'emballage
3. Appliquer Coalgan® sur la lésion
4. Retirer à l'arrêt du saignement ou laisser en place pour la cicatrisation et le retirer au max à 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche



## LIVRET 1<sup>ers</sup> SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.